



**Fabricamos material sanitario**  
DESDE ASTURIAS PARA EL MUNDO

**Mascarillas**



# Mascarilla QUIRÚRGICA IIR

Mascarilla quirúrgica IIR desechable. Consta de tres capas de tejido sin tejer, que proporciona comodidad y suavidad sin producir irritación. La mascarilla se sujeta al rostro mediante una goma para adaptar a la oreja y se ajusta a la nariz mediante una tira adaptable en el lado superior.

## Características

## Especificaciones

Descripción	Mascarilla rectangular con pieza de ajuste para nariz y banda elástica doble.	
Color	Azul	
Composición	Capas exteriores	Polipropileno (Non woven Fabric) Tela no tejida
	Capa interior filtrante	Polipropileno Tela fundida por soplado, no tejida
	Clip de nariz	Aluminio
	Banda elástica	Poliuretano y poliéster
Dimensiones	Cuerpo	Largo: 17,5cm / Ancho: 9,5cm
	Banda elástica	16 cm

Nuestra mascarilla quirúrgica IIR está fabricada conforme a las siguientes normas:

- UNE-EN 14683:2019 + AC:2019
- ISO:14683 11737-1:2018

### Presentación:

Cajas de 50 / 20 Uds.

### Condiciones de almacenaje:

Colocar en un lugar fresco y seco.

### Caducidad:

3 años desde la fecha de fabricación.

Declaración de Conformidad [+]

**VER INFORME TÉCNICO** Ref. 001 MKQ



# Modo DE USO

1

Desinfectar las manos.

2

Agarrar la mascarilla por las gomas elásticas.

3

Colocar la mascarilla en la caras y ajustar los elásticos.

4

Ajustar el clip nasal hasta que no queden huecos.



Abrir el envase y sacar la mascarilla. Con el clip de nariz hacia afuera y hacia arriba, colocarla sobre la cara haciendo la mascarilla sobre las orejas y empleando las gomas. Moldear el clip sobre la nariz para lograr un ajuste perfecto y acomodar el resto de la mascarilla hasta obtener una buena posición y protección.

# Cómo LO HACEMOS

Las líneas de producción han sido diseñadas para realizar la producción automática de mascarilla e incluye todos los procesos desde la carga de materia prima hasta conseguir las mascarillas terminadas. El diseño ha sido realizado según una metodología modular buscando la facilidad de uso y un mantenimiento reducido y sencillo. Todo el sistema mecánico de conformado es controlado electrónicamente por una arquitectura basada en PCs y el software CsPRO. Lo que posibilita un control en tiempo real de todos los subsistemas y una visualización por parte del operario (HMI) del estado actual de las máquinas.

Los parámetros fundamentales son gestionados electrónicamente permitiendo el control de la velocidad de fabricación y supervisando la calidad del producto fabricado.

Y todo bajo estrictas normas y procesos de fabricación y trazabilidad, e higiene, pasando los productos continuos controles de calidad tras su fabricación, sometiéndolas después a rigurosos controles de envasado y almacenado.

## Con qué LO HACEMOS

Nuestras mascarillas están fabricadas con tejido no-tejido de máxima calidad para poder garantizar la máxima protección y filtración antibacteriana. El tejido no-tejido, es aquel formado por aglutinamiento, físico, térmico o químico de fibras cortadas y filamentos sin pasar por un telar.

La materia prima habitual es un polipropileno 100%, de diferentes grosores y colores, material de fibras de textura suave. Es un material fácil de reciclar, tiene una buena capacidad de recuperación elástica, no es húmedo y se muestra muy resistente a los agentes químicos. Todo ello. Junto a su estabilidad térmica le confieren características óptimas para este uso.

Nuestras mascarillas quirúrgicas IIR con TEJIDO NO-TEJIDO son:

- HIDROFOBAS
- ANTIBACTERIANAS
- ANTIÁCAROS
- ANTIESTÁTICAS


Otros componentes:

Goma o elástico earloop: para llevar a oreja, es de varios grosores y medidas. Tira de nariz de varios grosores, dependiendo del tipo de mascarilla.

## Dónde LO HACEMOS

Nuestras mascarillas están fabricadas íntegramente en Asturias – España –.

**FORTIA** es una empresa socialmente responsable, proporcionando a nuestros clientes productos de calidad, fabricados en un entorno aséptico y con el marcado CE que corresponde a aquellos productos de fabricación 100 % europea.

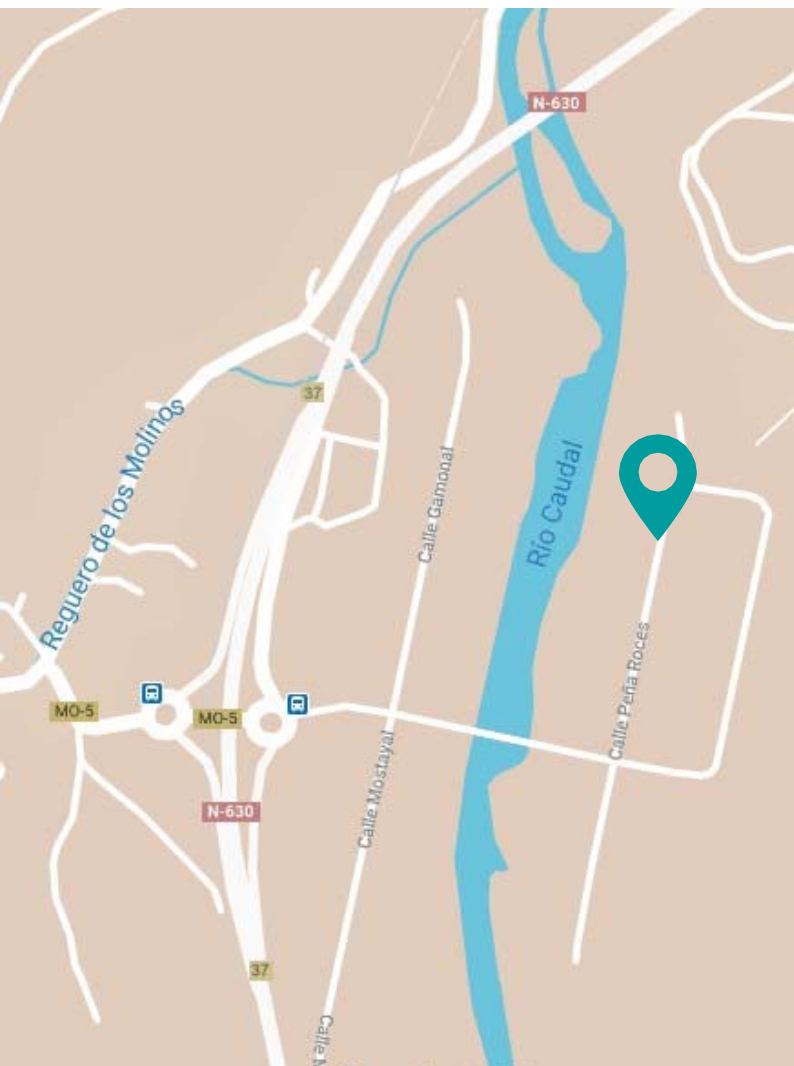

**FORTIA SEGURIDAD Y SALUD S.L.** Industrial de Argame, Calle Peña Manteca, parcela 15/19. MORCIN 33116

**Teléfono:**  
+34 984293557

**Email:**  
[administracion@fortiaseguridadysalud.com](mailto:administracion@fortiaseguridadysalud.com)  
[info@fortiaseguridadysalud.com](mailto:info@fortiaseguridadysalud.com)